

# Procesador de sonido Nucleus<sup>®</sup> 7

Guía rápida

- ✓ Primeros pasos
- ✓ Referencia rápida



CPI1000

*Hear now. And always*



# Acerca de

Su procesador de sonido Cochlear™  
Nucleus® 7 (número de modelo: CP1000)  
trabaja conjuntamente con el implante  
Cochlear para transferir sonido a su oído.



## **NOTA**

Encontrará más información y advertencias en la *Guía de usuario del procesador de sonido Nucleus 7*.

# Procesador de sonido





## Bloquear/desbloquear la pila

Bloquee la pila en la unidad de procesamiento para que no puedan abrirla los niños.



Hacia la izquierda para bloquear/  
hacia la derecha para desbloquear.

# Retirar/acoplar la pila




Retirar





Acoplar

El procesador se enciende automáticamente.

# Cambiar las pilas desechables

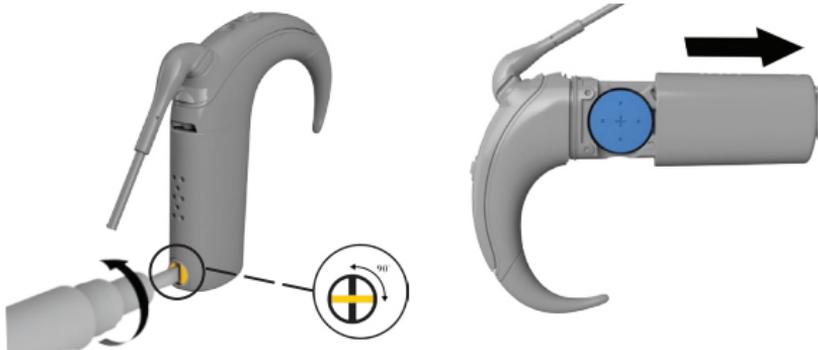

1. Gire el tornillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la tapa de las pilas con fijación de seguridad (y en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla).
2. Deslice la tapa para abrirla.

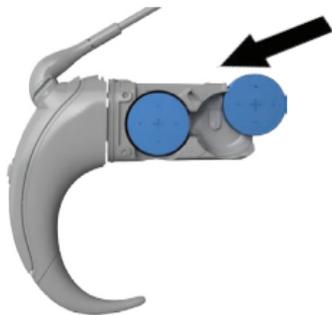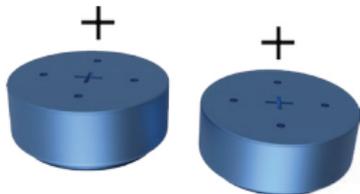

3. Inserte dos pilas desechables nuevas de cinc-aire 675 (PR44) (no de óxido de plata ni alcalinas) con la parte plana hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
5. El procesador se enciende automáticamente.

## Llevar su procesador



1. Coloque el procesador en su oreja de forma que la bobina quede colgando.



2. Mueva la bobina lateralmente y sitúela sobre su implante.



### PRECAUCIÓN

Si tiene dos implantes, debe utilizar el procesador de sonido correspondiente a cada implante.

# Encender y apagar

Para **encender**:

- Conecte la pila, o
- **Pulse brevemente** el botón.

Para **apagar**:

- Desconecte la pila, o
- **Mantenga pulsado** el botón durante 5 segundos, hasta que se apague.



## NOTA

El procesador de sonido se apaga automáticamente cuando se desconecta del implante durante más de dos minutos (si lo ha configurado así su especialista clínico).

# Cambiar de programa

**Pulse brevemente** el botón para cambiar de programa.

El número de pitidos o parpadeos **verdes** (si lo ha configurado así su especialista clínico) indica el número de programa.



# Transmitir audio

**Mantenga pulsado el** botón durante 2 segundos y **suelte a continuación** para transmitir audio.

**Azul:** transmitiendo audio desde los accesorios inalámbricos/la telebobina.

**Verde:** recibiendo sonido de los micrófonos.



## Pulse y suelte de nuevo

si necesita desplazarse a la siguiente fuente de audio:

<b>PRIMERO PULSE:</b>	La telebobina (si está configurada)
<b>DESPUÉS PULSE:</b>	El primer accesorio inalámbrico enlazado
<b>POR ÚLTIMO, PULSE:</b>	El siguiente accesorio inalámbrico enlazado

**Pulse brevemente** el botón para detener la transmisión y volver al ajuste anterior.

# Luces

## Uso cotidiano

LUZ	QUÉ SIGNIFICA
	El procesador parpadea cuando recibe sonido de los micrófonos (solo modo infantil).
	Encendiendo el procesador y cambiando de programa. El número de parpadeos indica el número del programa actual.
	El procesador parpadea mientras recibe el sonido desde la fuente de audio (solo modo infantil).
	Apagando el procesador.

## Alarmas

LUZ	QUÉ SIGNIFICA
	El procesador parpadea cuando la bobina está apagada (o conectada al implante erróneo).
	La pila del procesador está gastada. Cambie la pila.
	Fallo. Póngase en contacto con su especialista clínico. Permanece encendida hasta que se soluciona el fallo.

Hear now. And always



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D817606 ISS2

Spanish translation of 592756 ISS2 APR17