

Ce guide vous indique comment jumeler votre processeur Cochlear™ Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus 7 SE ou Kanso® 2\* avec votre iPhone®, iPod touch® ou iPad® pour que vous puissiez diffuser du son et contrôler et surveiller votre(vos) processeur(s). Vous pouvez également utiliser l'application Nucleus Smart† pour contrôler et surveiller votre(vos) processeur(s).

\* Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

† L'application Cochlear Nucleus Smart est disponible sur l'App Store. Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez le site [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility).

## Jumelage de votre/vos processeur(s)

### Remarque

- Ces instructions s'appliquent à la version iOS13. Les écrans des autres versions d'iOS peuvent différer légèrement.
- Certains écrans affichent votre nom et votre modèle de processeur. Les images présentées dans ce guide sont uniquement des exemples d'écrans ; elles peuvent différer de ce que vous voyez sur votre iPhone ou iPad. Suivez les instructions de ce guide tout en vous reportant aux écrans correspondants sur votre iPhone ou iPad pour procéder au jumelage.
- Si vous disposez d'autres processeurs ou prothèses auditives déjà jumelés, vous devez tout d'abord les déconnecter. Consultez la page 2 pour les instructions de déconnexion.


- 1 Sur votre appareil, ouvrez **Settings** (Réglages).



- 2 Appuyez brièvement sur **Accessibility** (Accessibilité).




- 3 Appuyez brièvement sur **Hearing Devices** (Appareils auditifs).

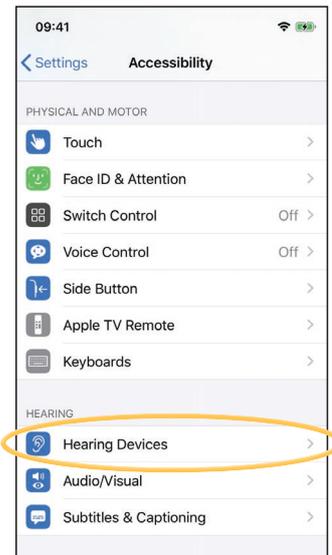

### Remarque

Si l'écran *Hearing Devices* (Appareils auditifs) s'ouvre, passez à l'étape 4.

- 4 Si **Bluetooth** n'est pas activé, cochez-le.

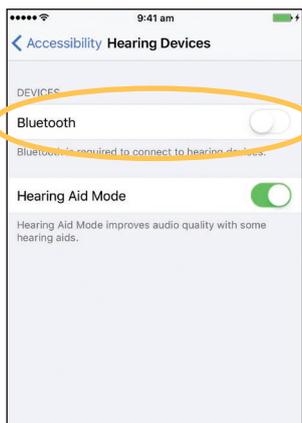

### REMARQUE

Ces instructions s'appliquent à la version iOS13. Pour les versions précédentes, vous devrez peut-être appuyer sur **General** (Général) puis sur **Accessibility** (Accessibilité).

- 5 **Désactivez** puis **Activez** votre/vos processeur(s).


Si vous disposez de deux processeurs, effectuez cette opération pour chacun d'eux, l'un après l'autre.

Votre appareil recherche votre/vos processeur(s)...

### Remarque


Si vous utilisez **un processeur et une prothèse auditive compatible**, vous pouvez également les jumeler de cette façon.

- 6 Cochez votre nom lorsqu'il s'affiche à l'écran.

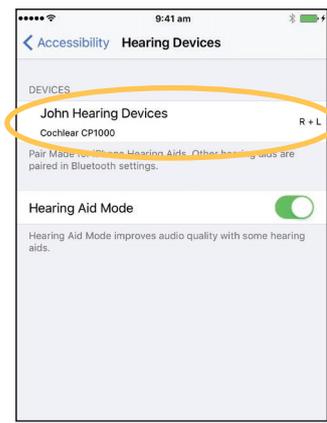

...SUITE À LA PAGE SUIVANTE...

- 7 Appuyez brièvement sur **Pair** (Jumeler) pour confirmer le jumelage.  
Si vous disposez de deux processeurs, le message suivant s'affiche deux fois.

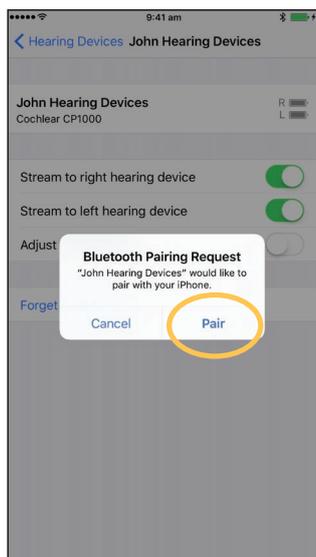

- 8 Attendez que les voyants de jumelage de votre processeur s'allument. Le jumelage peut prendre jusqu'à 2 minutes.

Terminer le jumelage :


- **Lumière bleue** clignotante pendant 4 secondes.
- **Tonalité d'ondulation**.



**Remarque**

Ne commencez pas à diffuser un contenu audio tant que le jumelage n'est pas terminé.

- 9 Le jumelage a bien été effectué !

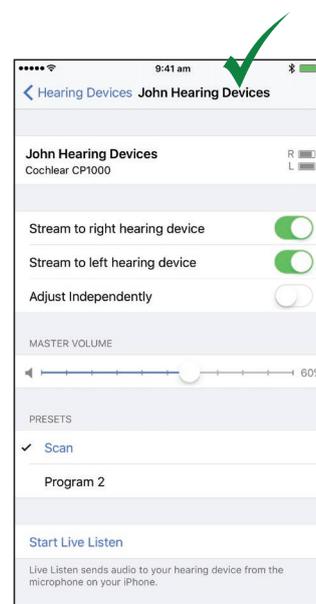

Vous pouvez maintenant configurer et utiliser l'**application Nucleus Smart** ! Pour plus de détails, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.



**Remarque**

- **Interférences radio** : lorsque vous tentez de jumeler ou de connecter votre processeur avec votre iPhone, votre iPod touch ou votre iPad, il est possible que certains appareils produisent des interférences, par ex., des fours micro-ondes, des routeurs sans fil ou des émetteurs audio TV. Si cela se produit, éloignez-vous de l'appareil concerné et réessayez.
- **Jumelage avec plusieurs appareils Apple** : vous pouvez jumeler votre processeur avec 5 appareils compatibles au maximum, mais vous ne pouvez le contrôler qu'avec un seul à la fois.

## Déconnexion de votre/vos processeur(s)

Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :


- tout d'abord, **déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.

- 1 Accédez à *Settings > Accessibility > Hearing Devices* (Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs) (voir page 1).
- 2 Sélectionnez le ou les processeurs jumelés.
- 3 Appuyez sur *Forget this device* (Oublier cet appareil) pour déconnecter le ou les processeurs.



**Remarque**


Si deux processeurs sont jumelés avec votre iPhone, votre iPod touch ou votre iPad, ils seront tous deux déconnectés.

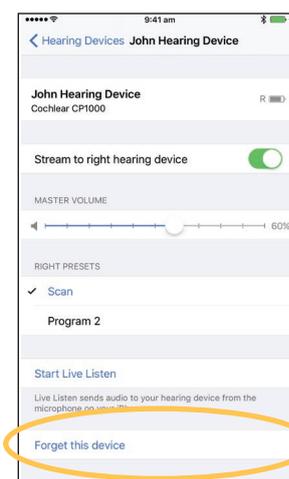

# Désactivation de la diffusion audio

Pour désactiver la diffusion audio :

- 1 Accédez à *Settings* > *Accessibility* > *Hearing Devices* (Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs) (voir page 1).
- 2 Sélectionnez le ou les processeurs jumelés.
- 3 Appuyez brièvement sur *Stream to hearing device* (Diffuser sur l'appareil auditif) pour désactiver la diffusion sur votre(vos) processeur(s).

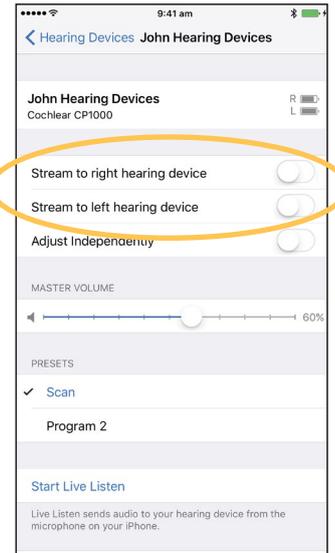

- Pour plus d'informations sur l'application, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.
- Pour plus d'informations sur le processeur, consultez le *mode d'emploi du processeur*.
- Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : [www.cochlear.com/](http://www.cochlear.com/)

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352  
**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352  
**EC REP | Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770  
**Cochlear Europe Ltd** 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom  
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Apple, iCloud, iPhone, iPod touch et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.