



Hear now. And always

আপনার Cochlear™ Nucleus®

Sound Processor যন্ত্র এবং

রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শ



আপনার বিহাইন্ড-দ্য-ইয়ার (BTE) সাউন্ড প্রসেসরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ


দৈনিক



একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন এবং পরিষ্কার করে নিন।




শুধুমাত্র একটি নরম ব্রাশ ব্যবহার করে কানেস্টর পিনগুলি ব্রাশ করে নিন।

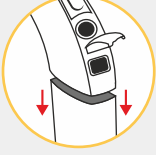

ব্যাটারী বের করে, কন্টাক্ট পয়েন্টগুলি পরিষ্কার করে নিন।




পেঁচানো তারটি ছাড়িয়ে নিন যাতে সেটি ছিঁড়ে না যায়।

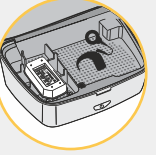

রাতে, Cochlear-এর তরফ থেকে দেওয়া Dry & Store® ইউনিটে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত প্রসেসরটি রেখে দিন।

সাপ্তাহিক

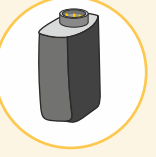

ব্যাটারী মডিউল, কয়েল, কয়েল ক্যাবল ও চুম্বকটি খুলে ফেলুন এবং একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে এবং নরম ব্রাশ ব্যবহার করে কন্টাক্ট পয়েন্টগুলি পরিষ্কার করুন। (ইয়ার হুকটি সঠিক জায়গায় রেখে দিন)

প্রতি 2 মাস অন্তর



Dry-Brik® ডেসিক্যান্ট বদলিয়ে নিন।

নির্দিষ্ট পরিবেশে Dry-Brik 2 মাস ব্যবহারের পরে নিজের আর্দ্রতা শোষণের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে এবং তাই আপনার সাউন্ড প্রসেসরকে আর্দ্রতা মুক্ত রাখা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর নাও হতে পারে।

প্রতি 3 মাস অন্তর




মাইক্রোফোন প্রোটেক্টরগুলি বদলিয়ে নিন - শব্দের গুণমানের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মরশুম অনুযায়ী



বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ঘাম থেকে রক্ষা পেতে অ্যাকোয়া + স্লিভ ব্যবহার করুন।

যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকার জন্য আপনার সাউন্ড প্রসেসর ইউজার গাইডটি পড়ুন

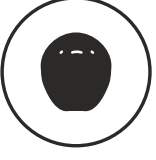

আপনার অফ-দ্য-ইয়ার (OTE) সাউন্ড প্রসেসরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

দৈনিক




আপনার সাউন্ড প্রসেসরের সমস্ত অংশ এবং অ্যাকসেসরিজ যেমন Cochlear SoftWear™ প্যাড, সেফটি লাইন, পরীক্ষা করে নিন, যাতে তার মধ্যে কেন ধুলো বা ময়লা লেগে না থাকে। একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন এবং পরিষ্কার করে নিন।

প্রতি রাতে আপনার প্রসেসরকে আর্দ্রতা মুক্ত রাখতে শুকিয়ে নিন:



Kanso® 2 Sound Processor এর ক্ষেত্রে, এটি হোম চার্জার বক্সে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করে রেখে দিন।

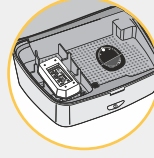

Kanso Sound Processor, এর ক্ষেত্রে, এটিকে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করে ড্রাই Dry & Store ইউনিটে রেখে দিন।

মাসিক



যদি আপনি Cochlear SoftWear প্যাড ব্যবহার করেন তাহলে সফটওয়্যার প্যাড ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাথে সাথে সেটি বদলিয়ে নিন।



সেফটি লাইন (যদি ব্যবহার করা হয়) পুরনো হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বদলিয়ে নিন।




এছাড়াও Kanso Sound Processor-এর ক্ষেত্রে, ব্যাটারিগুলি খুলে বের করে নিন এবং একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে কনট্যাক্টগুলি মুছে নিন।

প্রতি 2 মাস অন্তর



আপনি যদি Dry & Store ইউনিট ব্যবহার করেন, তাহলে Dry-Brik বদলিয়ে নিন। নির্দিষ্ট পরিবেশে 2 মাস ব্যবহারের পরে Dry-Brik নিজের আর্দ্রতা শোষণের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে এবং তাই আপনার সাউন্ড প্রসেসরকে আর্দ্রতা মুক্ত রাখা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর নাও হতে পারে।

প্রতি 3 মাস অন্তর

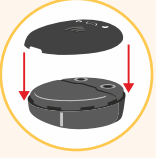

মাইক্রোফোন প্রোটেক্টরগুলি বদলিয়ে নিন - শব্দের গুণমানের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মরশুম অনুযায়ী



বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ঘাম থেকে রক্ষা পেতে অ্যাকোয়া + স্লিভ ব্যবহার করুন।

যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকার জন্য আপনার সাউন্ড প্রসেসর ইউজার গাইডটি পড়ুন



কি কি করবেন

- আপনার সাউন্ড প্রসেসরটি পরার পড়ার সময়, কান ও মাথার অংশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুষ্ক রাখুন, সাথে চুলের তেল / জেল / স্প্রে জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- সাউন্ড প্রসেসরের কোনো অংশে যেন ধুলো বা ময়লা প্রবেশ না করে।
যদি কখনও এমন কিছু ঘটে থাকে তবে তক্ষনাৎ প্রসেসরটি ঝেড়ে ফেলুন এবং একটি শুষ্ক নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিন। এটি কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। যদি প্রসেসরটি কাজ না করে তবে এটির পরিষেবার জন্য আপনার স্থানীয় ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করুন।



কি কি করবেন না

- প্রসেসরের তারগুলি কখনই টানাটানি করবেন না বা দোমড়াবেন বা মোচড়াবেন না।
- আপনার সাউন্ড প্রসেসরকে কখনই অত্যধিক গরমের মধ্যে যেমন বন্ধ গাড়ির ভিতরে বা সরাসরি সূর্যের আলোতে ফেলে রাখবেন না।
- স্নান করা অথবা সাঁতার কাটার সময়, সাউন্ড প্রসেসরটি কখনোই Aqua + sleeve ছাড়া ব্যবহার করবেন না। যদি কোনো কারণে আপনার সাউন্ড প্রসেসরটি ভিজে যায়, তাহলে সাথে সাথে সেটি মুছে শুকিয়ে নিন এবং কম করে আট ঘন্টার জন্য Dry & Store ইউনিট-এ / হোম চার্জারে রেখে দিন। যদি প্রসেসরটি কাজ না করে, তাহলে অবিলম্বে আপনার অডিওলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
Cochlear Nucleus গ্লোবাল ওয়ারেন্ট জলের মধ্যে সাউন্ড প্রসেসরের এমন ব্যবহারের প্রমাণের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যাবে, যা আপনার সাউন্ড প্রসেসরের ইউজার ম্যানুয়াল বা যেকোন Cochlear-ব্রাণ্ডেড জল প্রতিরোধী আবরণের ইউজার ম্যানুয়ালের নির্দেশাবলি অনুসারী নয়।



যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের টিপস সম্পর্কে আরও
জানতে QR কে ডাউনলোড করুন

Hear now. And always

Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions, we have provided more than 700,000 devices and helped people of all ages to hear and connect with life's opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks to advance hearing science and improve care.

That's why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.

 Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.

204, Second Floor, Platina Bldg., Plot No. C 59, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051 - India Tel: +91 20 6708 2935 Fax: +91 22 6112 1100

www.cochlear.com/in

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always follow the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.

The Cochlear Nucleus 8 Sound Processor is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 Sound Processor was tested to a depth of up to 1 metre for up to 1 hour. Refer to the relevant user guide for more information.

The Kanso 2 Sound Processor is dust and water resistant to level of IP68 of the International Standard IEC60529.

The Cochlear Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ can be continuously submerged under water to a depth of up to 3 metres for up to 2 hours. Refer to the relevant user guide for more information.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, the elliptical logo, and marks bearing an ® or ™ symbol, are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited (unless otherwise noted). Dry & Store and Dry-Brik are registered trademarks of Ear Technology Corporation.

© Cochlear Limited 2023. D2068802 V2 JUN2023.