




เครื่องแปลงสัญญาณเสียง  
Nucleus® 7 S

การอ้างอิงด่วน

# เกี่ยวกับ


คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง *Nucleus*<sup>®</sup> 7 S เป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อบ่งใช้ และข้อห้ามใช้ รวมทั้งคำเตือนและการแก้ไขปัญหาลงหลังจากที่คุณอ่านคู่มือผู้ใช้แล้ว ให้ใช้การอ้างอิงส่วนนี้เพื่อทบทวนการทำงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ

# เครื่องแปลงสัญญาณเสียง

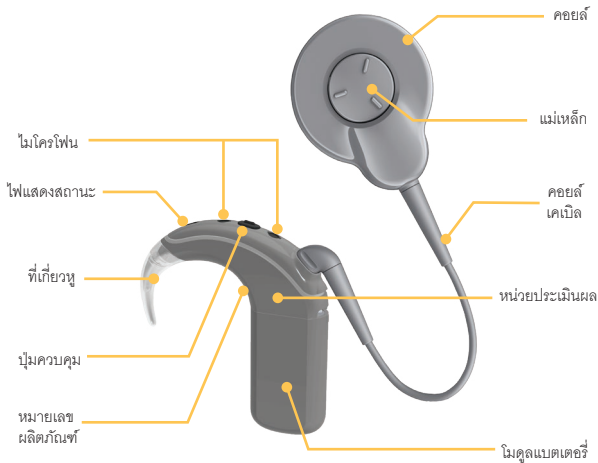

# ล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่

ล็อคแบตเตอรี่เข้ากับหน่วยประเมนผลเพื่อป้องกันการจัดแฉะ

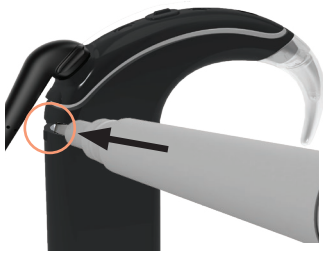

ดันไปด้านซ้ายเพื่อล็อค/  
ดันไปด้านขวาเพื่อปลดล็อค

## ถอด/ใส่แบตเตอรี่



ถอด





ใส่

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะเปิด  
โดยอัตโนมัติ

## เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง




1. หมุนสกรูล็อคในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกฝาแบตเตอรี่ที่ป้องกันการรัดแฉะ (หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก)
2. เลื่อนเพื่อเปิด

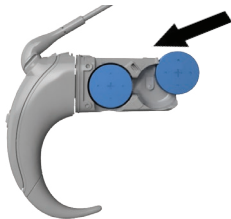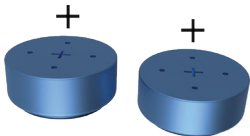

3. ใส่แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งแบบ Zinc-Air 675 (PR44) ใหม่ 2 ก้อน (ห้ามใช้แบบซีลเวอร์หรือออกไซด์หรืออัลคาไลน์) โดยหงายด้านเรียบขึ้น


4. ใส่ฝาแบตเตอรี่กลับเข้าที่  
5. เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะเปิดโดยอัตโนมัติ

# สวมใส่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง

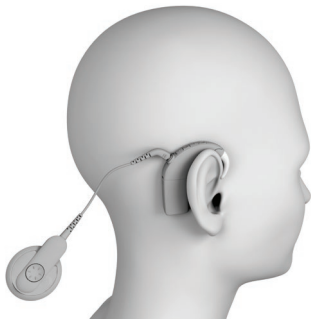

1. วางเครื่องแปลงสัญญาณเสียงไว้ที่หูของคุณโดยปล่อยให้คอยล์ห้อยลง



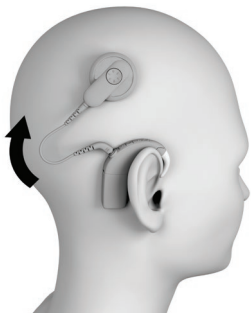

2. ขยับคอยล์ไปทางด้านข้างและวางลงบนประสาทหูเทียมของคุณ

**ข้อควรระวัง**

หากคุณมีประสาทหูเทียมสองข้าง คุณต้องใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ถูกต้องสำหรับประสาทหูเทียมแต่ละข้าง

# เปิดและปิด

## วิธีการเปิด:

- เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือ
- กดปุ่มแล้วปล่อย

## วิธีการปิด:

- ถอดแบตเตอรี่ออกหรือ
- กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าจะปิด



## หมายเหตุ

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงกับประสาทหูเทียม เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสองนาทีหากได้รับการเปิดใช้งานจากแพทย์ของคุณ

# เปลี่ยนโปรแกรม

กดปุ่มแล้วปล่อย  
เพื่อเปลี่ยนโปรแกรม

จำนวนของเสียงบีบหรือไฟกะพริบ  
**สีเขียว** (หากตั้งค่าโดยแพทย์)  
แสดงถึงหมายเลขของโปรแกรม



## สตริมเสียง

กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที แล้วปล่อย  
เพื่อสตริมเสียง

**สีน้ำเงิน:** กำลังสตริมเสียงจาก  
เทเลคอยล์/อุปกรณ์เสริมไร้สาย

**สีเขียว:** กำลังรับเสียงจากไมโครโฟน







กตแล้วปล่อยอีกครั้งหากคุณต้องการสลับ  
ไปยังแหล่งเสียงถัดไป

กตครั้งแรก	เทเลคอยล์ (หากตั้งค่าไว้)
กตครั้งที่สอง	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่เครื่องแรก
กตครั้งที่สาม...	อุปกรณ์เสริมไร้สายที่จับคู่เครื่องถัดไป...




กตปุ่มแล้วปล่อยเพื่อหยุดการสตรีมและ  
กลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

# ไฟ

## การใช้งานประจำวัน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบขณะรับเสียงจากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนโปรแกรม จำนวนของการกะพริบแสดงถึงหมายเลขของโปรแกรมห้างปัจจุบัน
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบขณะรับเสียงจากแหล่งเสียง (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังปิดเครื่องแปลงสัญญาณเสียง

## การแจ้งเตือน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะกะพริบในขณะที่คอยล์ ไม่ได้เชื่อมต่อ (หรือเชื่อมต่อกับประสาหูเทียมที่ไม่ถูกต้อง)
	แบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่
	ผิดปกติ ติดต่อแพทย์ของคุณ ไฟจะติดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

# Hear now. And always



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Europe Ltd** 6 Dashwood Lang Road, Bourne

Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

**Cochlear Americas**

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และไดโนซอร์ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2020

D1932158 V1

Thai translation of D1790743 V1 2021-10