

คู่มือการจับคู่ Cochlear™ (สำหรับ iPhone®/iPod touch®/iPad®)



คู่มือนี้จะแสดงวิธีการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus 7 SE หรือ Kanso® 2* กับ iPhone®, iPod touch® หรือ iPad® เพื่อให้คุณสามารถสตรีมเสียงและควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ คุณยังสามารถใช้แอป Nucleus Smart† เพื่อควบคุมและติดตามเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณได้อีกด้วย

* ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น


† แอป Nucleus Smart ของ Cochlear สามารถดาวน์โหลดได้บน App Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมความเข้ากันได้ โปรดไปที่ www.cochlear.com/compatibility

จับคู่เครื่องแปลงสัญญาณของคุณ


หมายเหตุ

- คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับ iOS13 iOS เวอร์ชันอื่นอาจมีหน้าจอที่แตกต่างเล็กน้อย
- บางหน้าจอจะแสดงชื่อของคุณและรุ่นของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง รูปภาพที่แสดงในคู่มือนี้เป็นเพียงหน้าจอตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นบน iPhone หรือ iPad ของคุณ ใช้คำแนะนำในคู่มือนี้ร่วมกับหน้าจอที่เกี่ยวข้องบน iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อนำทางคุณตลอดการจับคู่
- หากคุณจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงหรือเครื่องช่วยฟังอื่นไว้แล้ว คุณต้องยกเลิกการจับคู่ก่อน ดูคำแนะนำในการยกเลิกการจับคู่ที่หน้า 2


1 บนอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิด Settings (การตั้งค่า)

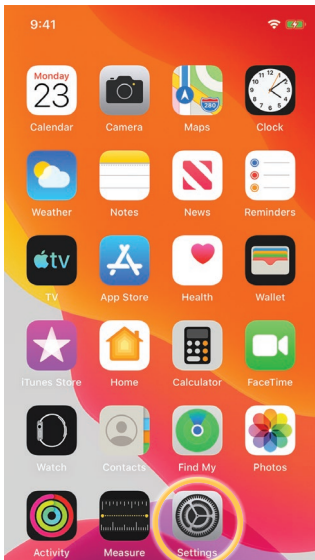

2 แตะ Accessibility (การช่วยการเข้าถึง)

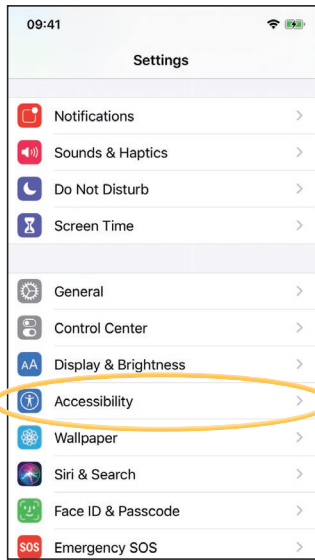

3 แตะ Hearing Devices (อุปกรณ์ช่วยฟัง)

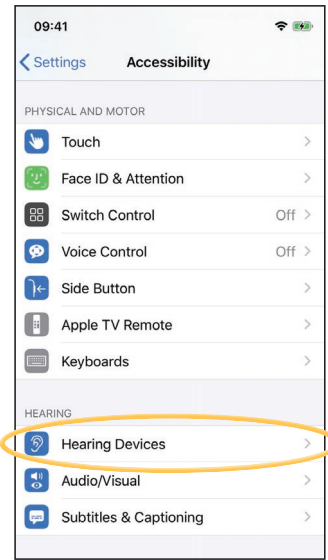


หมายเหตุ

หากหน้าจอ Hearing Devices (อุปกรณ์ช่วยฟัง) ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4

หมายเหตุ

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับ iOS13 สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องแตะ General (ทั่วไป) แล้วแตะ Accessibility (การช่วยการเข้าถึง)

4 หากไม่ได้เปิด Bluetooth ให้เลือกตอนนี้

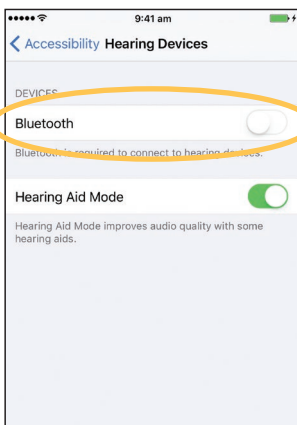


5 ปิดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ แล้วเปิดใหม่

หากคุณมีเครื่องแปลงสัญญาณเสียงสองเครื่อง ให้ทำทั้งสองเครื่องโดยทำครั้งละเครื่อง อุปกรณ์จะค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ...

หมายเหตุ


หากคุณใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงและเครื่องช่วยฟังที่ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองด้วยวิธีนี้

6 เลือกชื่อของคุณเมื่อปรากฏบนหน้าจอ

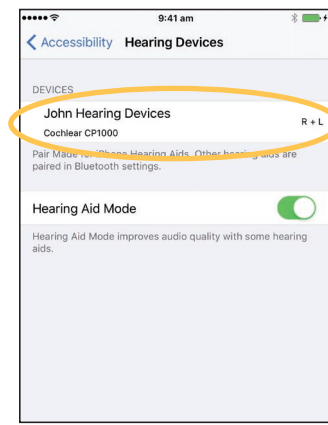

...มีต่อในหน้าถัดไป...

- 7.แตะ Pair (จับคู่) เพื่อยืนยันการจับคู่ หากคุณมีเครื่องแปลงสัญญาณสองเครื่อง คุณจะเห็นข้อความนี้สองครั้ง

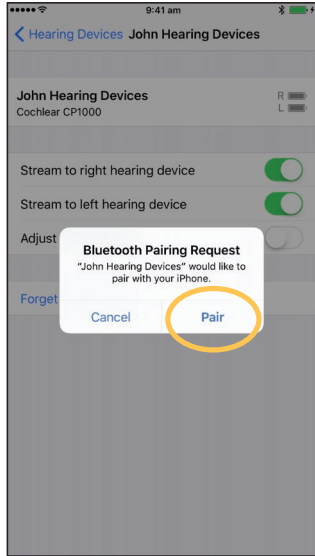

- 8.รอสัญญาณการจับคู่บนเครื่องแปลงสัญญาณของคุณ การจับคู่อาจใช้เวลานานถึง 2 นาที


เสร็จสิ้นการจับคู่:

- ไฟสีน้ำเงินกะพริบเป็นเวลา 4 วินาที
- เสียงไล่ระดับดัง




หมายเหตุ
อย่าเริ่มสตรีมเสียงจนกว่าการจับคู่จะเสร็จสิ้น

- 9.การจับคู่สำเร็จ!

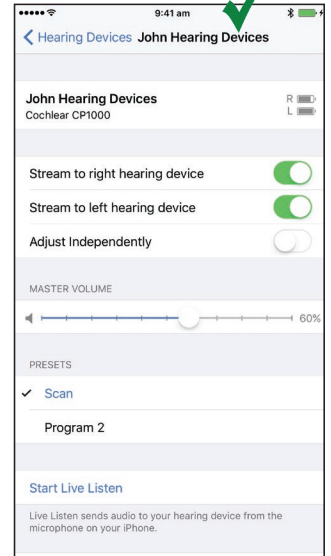

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าและใช้แอป Nucleus Smart ได้แล้ว! โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้แอป Nucleus Smart

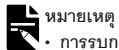

หมายเหตุ

- การรบกวนของคลื่นวิทยุ: ขณะพยายามจับคู่หรือเชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงกับ iPhone, iPod touch หรือ iPad อาจมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์บางชนิด เช่น เตาไมโครเวฟ เราเตอร์ไร้สาย หรือ TV Streamer หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ออกจากอุปกรณ์นั้นและลองอีกครั้ง
- จับคู่กับอุปกรณ์ Apple หลายเครื่อง: คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงกับอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้สูงสุด 5 เครื่อง แต่คุณสามารถควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ Apple ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

ยกเลิกการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณของคุณ

หากคุณเปลี่ยนเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงใหม่จากศูนย์ซ่อม คุณจะต้อง:


- ขึ้นแรกยกเลิกการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงเครื่องเก่า
- จากนั้นจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงใหม่

- 1.ไปที่ Settings > Accessibility > Hearing Devices (การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง) (ดูหน้า 1)
- 2.เลือกเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่จับคู่
- 3.แตะ Forget this device (ลบอุปกรณ์นี้) เพื่อยกเลิกการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงลบอุปกรณ์นี้



หมายเหตุ


หากคุณจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงสองเครื่องกับ iPhone, iPod touch หรือ iPad ของคุณ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องจะถูกยกเลิกการจับคู่

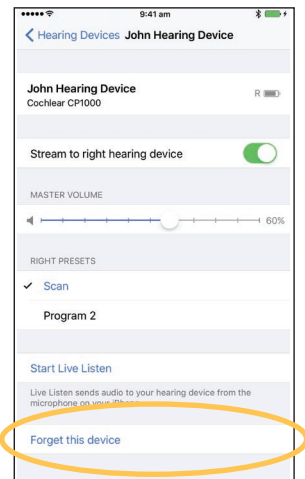

ปิดใช้งานการสตรีมเสียง

วิธีปิดใช้งานการสตรีมเสียง:

- 1 ไปที่ *Settings > Accessibility > Hearing Devices* (การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง) (ดูหน้า 1)
- 2 เลือกเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่จับคู่
- 3 แตะ *Stream to hearing device* (สตรีมไปยังอุปกรณ์ช่วยฟัง) เพื่อปิดการสตรีมไปยังเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ

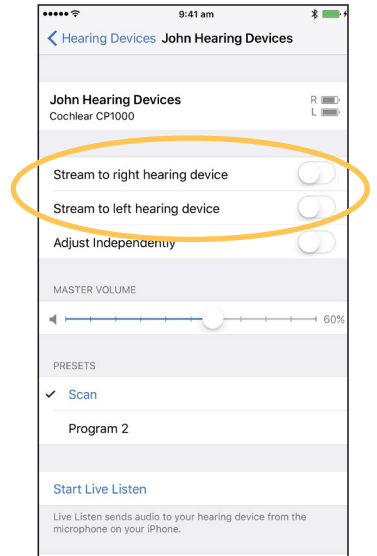

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป โปรดดูคู่มือผู้ใช้แอป *Nucleus Smart*
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง
- ดูเคล็ดลับ วิธีโอเอสดีการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมายทางออนไลน์ได้ที่ www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555
Fax: +61 2 9428 6352
ECREB Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus และโลโก้วงรีเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited Apple, iCloud, iPhone, iPod touch และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ