

Taclale

Sunete Ling

Sunetele Ling sunt sunete diferite, variind de la registru grav la cel înalt. Le puteți folosi pentru a verifica dacă copilul dvs. aude gama de sunete de vorbire necesare pentru a învăța limbajul. Dacă copilul dvs. folosește un implant cochlear, Baha sau un aparat auditiv, aceste sunete pot fi folosite pentru a verifica dacă acest echipament funcționează corect.

Testul cu Sunete Ling a fost dezvoltat de Dr. Daniel Ling și verifică dacă copilul dvs. poate auzi (detectare) și poate recunoaște în timp fiecare sunet (identificare) în intervalul de vorbire.


Sunet Ling	Ton
m de ex. „masă”	„m” este un sunet în registru grav și, dacă copilul dvs. nu-l poate auzi, este probabil să nu aibă suficient auz de registru grav pentru a dezvolta vorbirea cu intonație normală și fără erori la pronunția vocalelor
u de ex. „sus”	„u” este ton în registru grav
i de ex. „fi”	„i” combină registrul grav cu cel înalt
a de ex. „sar”	„a” se află în mijlocul registrului vorbirii
ș de ex. „duș”	„ș” este în registrul moderat înalt al vorbirii
s de ex. „suc”	„s” este în registrul tonurilor foarte înalte ale vorbirii

Cum se testează

- Spuneți câte un sunet.
- Schimbați ordinea de fiecare dată când dați testul pentru a vă asigura că copilul dvs. nu intuiește sau ghicește sunetele după ordinea în care sunt prezentate.
- Asigurați-vă că mediul este liniștit și calm.
- La început, rostiți sunetul la o distanță de 20 cm de microfonul copilului dvs.
- Odată ce copilul dvs. răspunde în mod consecvent la acea distanță, creșteți-o la 1 m, apoi la 2 m, iar apoi la 3 m. (2 m este distanța tipică pentru conversația între două persoane. 3 m este distanța tipică pentru conversația între mai mult de două persoane.)
- Folosiți o voce normală și așezați-vă lângă sau în spatele copilului pentru a vă asigura un răspuns exclusiv auditiv.
- Atunci când copilul dvs. răspunde, încurajați-l (de ex. „Ai auzit! ... Ai ascultat bine!”)
- La început, copilul dvs. s-ar putea să nu vă arate sau să vă spună ce sunet a auzit, dar poate să arate că l-a auzit întorcându-se, zâmbind sau stând nemișcat. Un copil mic poate răspunde mai bine dacă folosiți jucării în loc de imagini.
- Dacă copilul dvs. are două implanturi cochleare sau Baha, sau poartă un implant cochlear la o ureche și un aparat auditiv la cealaltă, este o idee bună să verificați fiecare dispozitiv separat.
- Dacă copilul nu răspunde la un sunet, încercați să rostiți din nou sunetul cu o anumită intonație și mai mult timp. Dacă copilul dvs. nu răspunde a doua oară, treceți la un alt sunet. Faceți notițe și discutați cu audiologul, profesorul sau terapeutul dvs.

În acest tabel, cele 6 sunete Ling, împreună cu alte sunete de vorbire, sunt reprezentate pe o audiogramă.

Aceasta ilustrează atât tonul, cât și intensitatea fiecărui sunet. Ar trebui să discutați cu specialistul audiolog pentru a vă explica această audiogramă.

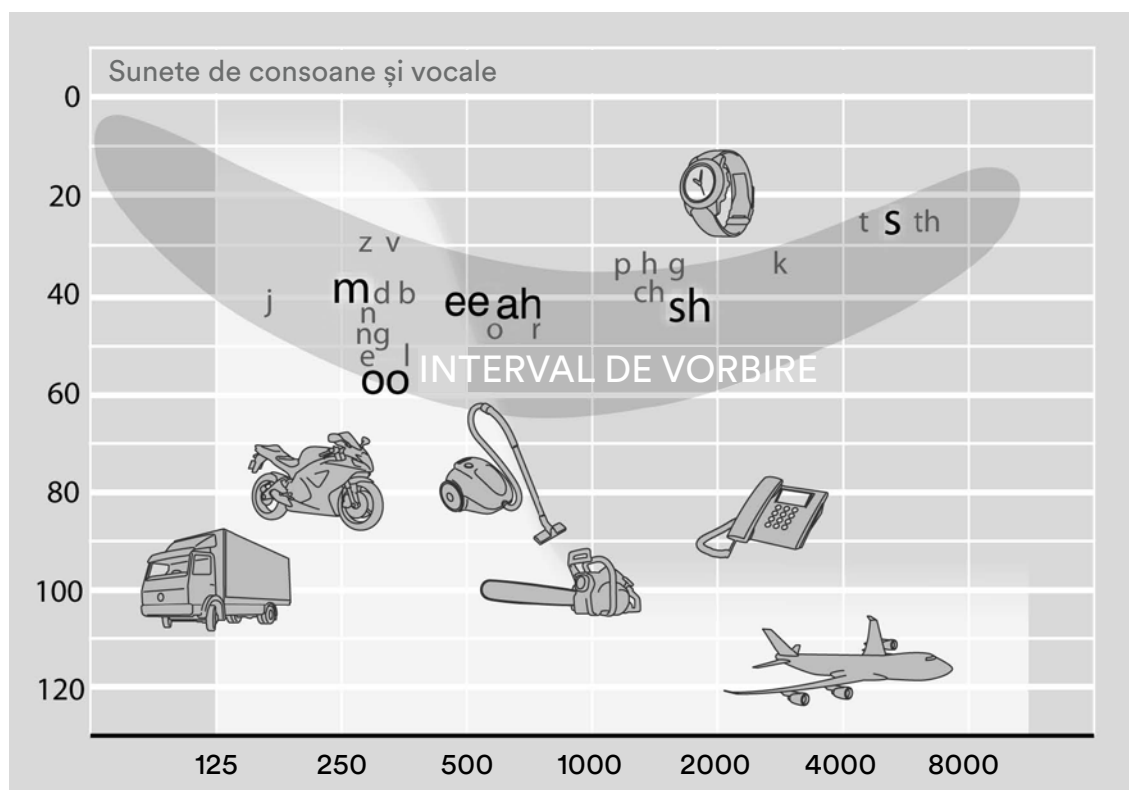

m



a



i



u



ș



s



■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352

■ Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205

■ Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Mailänder Straße 4 a, 30539 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426

Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000

Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Prime Office Building, Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, Czech Republic T: +420 222 13 53 13

www.cochlear.com



Consultați-vă cu specialistul dvs. din sănătate cu privire la tratamentele hipoacuziei. Rezultatele pot varia, iar specialistul dvs. vă va sfătui în legătură cu factorii care v-ar putea afecta rezultatul. Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare. Există posibilitatea ca unele produse să nu fie disponibile în anumite țări. Contactați reprezentantul dvs. local Cochlear pentru informații despre produs.

© Cochlear Limited 2025. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus și logo-ul de formă eliptică sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Cochlear.

D2340687-V2 2025-05 Romanian Translation of D2090600 V1 2023-04