



Hear now. And always

നിങ്ങളുടെ Cochlear™ Nucleus®

Sound Processor

പരിപാലനത്തിനും

പരിചരണനത്തിനുമുള്ള

ദിപ്പുകൾ



നിങ്ങളുടെ ബിഹൈൻഡ് റി ഇയർ (ബിടിഇ) സൗണ്ട് പ്രൊസസറിന്റെ പരിപാലനവും പരിചരണവും


ദിവസവും



മൃദുവായ ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കുക.




സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കണക്റ്റർ പിന്നുകൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക.

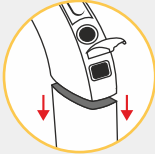

ബാറ്ററികൾ നീക്കം ചെയ്യുക, കോൺടാക്റ്റ് പോയിന്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുക.



പൊട്ടാതിരിക്കാൻ കേബിൾ അൺട്രിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

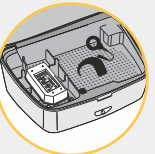

രാത്രിയിൽ, Cochlear നൽകുന്ന Dry & Store[®] യൂണിറ്റ് ൽ പൂർണ്ണമായും അസംബിൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സർ സംഭരിക്കുക.

പ്രതിമാസം




ബാറ്ററി മൊഡ്യൂൾ, കോയിൽ, കോയിൽ കേബിൾ, കാന്തം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക, മൃദുവായ ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് പോയിന്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുക & സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്. (ഇയർ ഹുക്ക് സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക)

കാരോ 2 മാസത്തിലും



Dry-Brik[®] ഡെസിക്ക്കന്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. ചില പരിതസ്ഥിതികളിൽ 2 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം Dry-Brik[®] അതിന്റെ ഇൗർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ പ്രോസസ്സർ ഇൗർപ്പരഹിതമായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് ഫലപ്രദമാകില്ല.

കാരോ 3 മാസത്തിലും

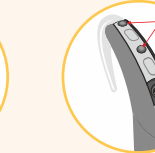

മൈക്രോഫോൺ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക - ശബ്ദത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സീസണൽ



മഴയിൽ നിന്നും അമിത വിയർപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ Aqua+ സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുക.

പരിചരണവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ ഉപയോക്തൃ ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക



നിങ്ങളുടെ ഓഫ്-ദി-ഇയർ (ഓടിഇ) സൗണ്ട് പ്രോസസറിന്റെ പരിപാലനവും പരിപാലനവും

ദിവസവും




നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രോസസറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആക്സസറികളും പരിശോധിക്കുക ഉദാ. Cochlear® SoftWear™ പാഡുകൾ, സുരക്ഷാ ലൈൻ, അഴുക്കും & കറയും. മൃദവായ ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കുക.

എല്ലാ രാത്രിയും ഉണക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രോസസർ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുക:



Kanso® 2 Sound Processor കാര്യത്തിൽ, അത് ഹോം ചാർജറിൽ പൂർണ്ണമായി അസംബിൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

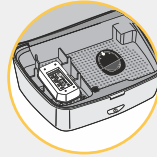

Kanso Sound Processor കാര്യത്തിൽ, അത് പൂർണ്ണമായും Dry & Store® യൂണിറ്റ് ൽ സംഭരിക്കുക.

പ്രതിമാസം



മൃദവായ വസ്തുങ്ങൾ പാഡ് (ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ) അത് ധരിക്കുകയോ കേടാകുകയോ ചെയ്താൽ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.



സേഫ്റ്റി ലൈൻ (ഉപയോഗിച്ചാൽ) തേയ്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.




കൂടാതെ, Kanso Sound Processor കാര്യത്തിൽ, ബാറ്ററികൾ നീക്കം ചെയ്യുക, മൃദവായ ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റുകൾ തുടയ്ക്കുക.

ഓരോ 2 മാസത്തിലും



നിങ്ങൾ ഒരു Dry & Store® യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, Dry-Brik® മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. ചില പരിതസ്ഥിതികളിൽ 2 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം Dry-Brik® അതിന്റെ ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ പ്രോസസ്സർ ഈർപ്പരഹിതമായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് ഫലപ്രദമാകില്ല.

ഓരോ 3 മാസത്തിലും

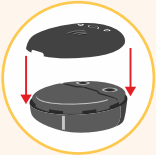

മൈക്രോഫോൺ സംരക്ഷകരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക - ശബ്ദത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സീസണൽ



മഴയിൽ നിന്നും അമിത വിയർപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ Aqua+ സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുക.

പരിചരണവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രോസസർ ഉപയോക്തൃ ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക



ചെയ്യേണ്ടത്

- നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ ധരിക്കുമ്പോൾ, ആ പരിസരം ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയുള്ളതും ഉണങ്ങിയതും ഹെയർ ഓയിൽ / ജെൽ / സ്പ്രേ മുതലായ മുടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും സൂക്ഷിക്കുക.
- സൗണ്ട് പ്രൊസസറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് മണലോ അഴുക്കോ കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിയുന്നത്ര കുലുക്കുക, മൃദവായ ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ തുടയ്ക്കുക. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ, സേവനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഇത് തിരികെ നൽകുക.



ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്

- ഒരിക്കലും കേബിളുകൾ വലിച്ചുനീട്ടുകയോ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
- കാറിനുള്ളിലോ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിലോ പോലുള്ള കടുത്ത ചൂടിൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
- കുളിക്കുമ്പോഴോ നീന്തുമ്പോഴോ ഷവർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും Aqua+ സ്ലീവ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ ധരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊസസർ നനഞ്ഞാൽ, അത് ഉണക്കി തുടച്ച് Dry & Store[®] യൂണിറ്റ് / ഫോം ചാർജറിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കുക. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കിലേക്ക് തിരികെ നൽകണം. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോക്തൃ മാനുവലിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും Cochlear-ബ്രാൻഡഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് കേസിംഗിന്റെ ഉപയോക്തൃ മാനുവലിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നം വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ Cochlear Nucleus ഗ്ലോബൽ വാറന്റി അസാധുവാകും.




പരിചരണ, പരിപാലന ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കയ്യുത്തൂർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക

Hear now. And always

Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions, we have provided more than 700,000 devices and helped people of all ages to hear and connect with life's opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks to advance hearing science and improve care.

That's why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.

 Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.
204, Second Floor, Platina Bldg., Plot No. C 59, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051 - India Tel: +91 20 6708 2935 Fax: +91 22 6112 1100

www.cochlear.com/in

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always follow the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.

The Cochlear Nucleus 8 Sound Processor is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 Sound Processor was tested to a depth of up to 1 metre for up to 1 hour. Refer to the relevant user guide for more information.

The Kanso 2 Sound Processor is dust and water resistant to level of IP68 of the International Standard IEC60529.

The Cochlear Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ can be continuously submerged under water to a depth of up to 3 metres for up to 2 hours. Refer to the relevant user guide for more information.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, the elliptical logo, and marks bearing an ® or ™ symbol, are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited (unless otherwise noted). Dry & Store and Dry-Brik are registered trademarks of Ear Technology Corporation.

© Cochlear Limited 2023. D2068802 V2 JUN2023.