

En esta guía se explica cómo enlazar los procesadores de sonido Cochlear™ Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus 7 SE o Kanso® 2* con iPhone®, iPod touch® o iPad®, para que pueda transmitir audio y controlar y monitorizar los procesadores de sonido. También puede utilizar la aplicación Nucleus Smart† para controlar y monitorizar los procesadores de sonido.

* No todos los productos están disponibles en todos los países.

† La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en la App Store. Para obtener información acerca de la compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.

Enlazar los procesadores

NOTAS

- Estas instrucciones son para iOS13. Otras versiones de iOS pueden tener pantallas ligeramente diferentes.
- En algunas pantallas se mostrará su nombre y el modelo del procesador de sonido. Las imágenes que se muestran en esta guía son únicamente pantallas de ejemplo y pueden diferir de lo que se ve en su iPhone o iPad. Utilice las instrucciones de esta guía junto con las pantallas correspondientes de su iPhone o iPad como guía para el enlace.
- Si ya ha enlazado otros procesadores de sonido o prótesis auditivas, en primer lugar deberá desenlazarlos. Vaya a la página 2 para consultar las instrucciones de desenlace.


- 1 En su dispositivo, abra **Settings** (Ajustes).



- 2 Toque **Accessibility** (Accesibilidad).



- 3 Toque **Hearing Devices** (Dispositivos auditivos).

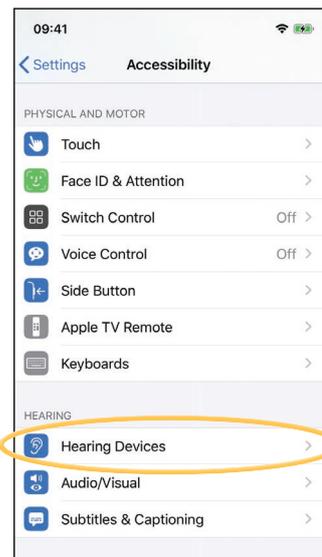


NOTA

Si se abre la pantalla **Hearing Devices** (Dispositivos auditivos), vaya al paso 4.

NOTA

Estas instrucciones son para iOS13. En versiones anteriores, puede que tenga que tocar **General** y, después, **Accessibility** (Accesibilidad).

- 4 Si la opción **Bluetooth** está desactivada, actívala.

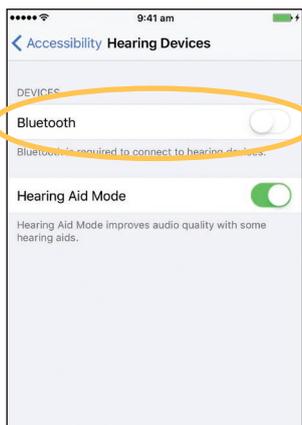


- 5 **APAGUE** los procesadores de sonido y, a continuación, **ENCIÉNDALOS**.

Si tiene dos procesadores de sonido, realice este paso en ambos, uno después del otro.
El dispositivo busca los procesadores de sonido...

NOTA


Si utiliza un **procesador de sonido** y una **prótesis auditiva compatible**, también se pueden enlazar de esta manera.

- 6 Seleccione su nombre cuando aparezca en pantalla.

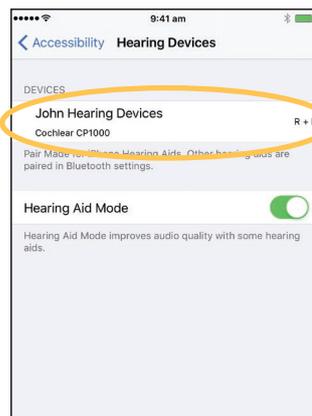

... CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE...

- 7 Toque **Pair** (Enlazar) para confirmar el enlace.
Si tiene dos procesadores, este mensaje aparecerá dos veces.

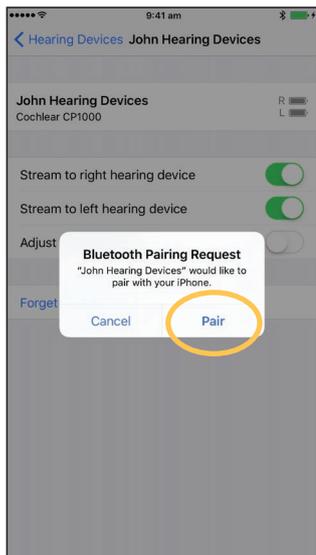

- 8 Espere a que aparezcan los indicadores de enlace en el procesador. El proceso puede durar hasta 2 minutos.

Fin del enlace:

- Parpadeo azul durante 4 segundos
- Tono oscilante



NOTA

No comience a transmitir audio hasta que no haya terminado el enlace.

- 9 Enlace finalizado correctamente.



Ya está listo para configurar y utilizar la **aplicación Nucleus Smart**. Consulte la *Guía de usuario de la aplicación Nucleus Smart* para obtener más información.



NOTAS

- **Interferencias de radio:** al intentar enlazar o conectar su procesador de sonido con un dispositivo iPhone, iPod touch o iPad, puede experimentar interferencias de otros dispositivos (p. ej., un microondas, un router inalámbrico o TV Streamer). Si esto ocurre, aléjese del dispositivo y vuelva a intentarlo.
- **Enlace con múltiples dispositivos Apple:** puede enlazar su procesador de sonido con hasta 5 dispositivos Apple compatibles, pero solo puede controlarlo desde un dispositivo Apple cada vez.

Desenlazar los procesadores

Si cambia de procesador o procesadores de sonido, por ejemplo, si recibe un nuevo procesador de sonido por parte del centro de reparación, deberá:


- En primer lugar, **Unpair** (Desenlazar) los antiguos procesadores de sonido.
- A continuación, **Pair** (Enlazar) los nuevos procesadores de sonido.

- 1 Vaya a *Settings > Accessibility > Hearing Devices* (Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos) (consulte la página 1).
- 2 Seleccione el procesador de sonido enlazado.
- 3 Toque *Forget this device* (Omitir dispositivo) para desenlazar el procesador de sonido.



NOTA


Si tiene dos procesadores de sonido enlazados al iPhone, iPod touch o iPad, ambos se desenlazarán.

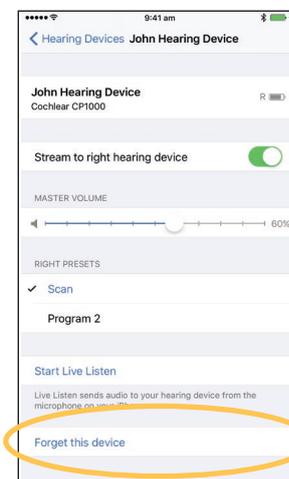

Desactivar el streaming de audio

Para desactivar el streaming de audio:

- 1 Vaya a *Settings > Accessibility > Hearing Devices* (Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos) (consulte la página 1).
- 2 Seleccione el procesador de sonido enlazado.
- 3 Toque *Stream to hearing device* (Transmitir al dispositivo auditivo) para desactivar la transmisión a su(s) procesador(es) de sonido.

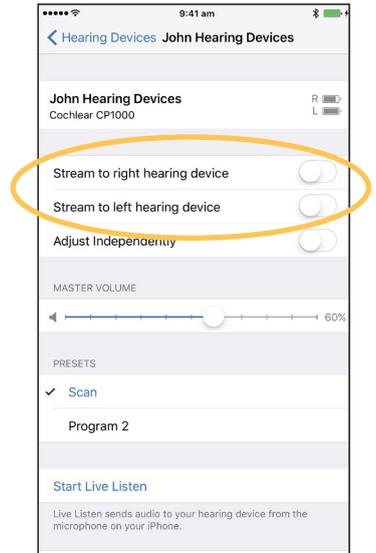

- Para obtener más información sobre la aplicación, consulte la *Guía de usuario de la aplicación Nucleus Smart*.
- Para obtener más información sobre el procesador de sonido, consulte la *Guía de usuario de su procesador de sonido*.
- Visite nuestro sitio web para descubrir consejos, tutoriales en vídeo y mucho más: www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555
Fax: +61 2 9428 6352
EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel:
+44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited. Apple, iCloud, iPhone, iPod touch y iPad son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y en otros países.