

En esta guía se explica cómo enlazar los procesadores de sonido Cochlear™ Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus 7 SE, Nucleus 7 S o Kanso® 2\* con la aplicación Nucleus Smart en un smartphone Android compatible†, para que pueda utilizar la aplicación para controlar y monitorizar sus procesadores de sonido.

## NOTAS

- Para utilizar la versión Android de la aplicación, es necesario que su procesador de sonido tenga instalado el firmware más reciente. Consulte con el especialista clínico.
- En algunas pantallas se mostrará su nombre y el modelo del procesador de sonido. Las imágenes que se muestran en esta guía son únicamente pantallas de ejemplo y pueden diferir de lo que se ve en su aplicación. Utilice las instrucciones de esta guía junto con las pantallas correspondientes de la propia aplicación como guía para su uso.

\* No todos los productos están disponibles en todos los países.

† Para obtener información acerca de la compatibilidad, visite [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility).


## Enlazar sus procesadores

### NOTAS


- Si ya ha enlazado otros procesadores de sonido, antes deberá desenlazarlos. Vaya a la página 4 para consultar las instrucciones de desenlace.
- Interferencias de radio: al intentar enlazar o conectar su procesador de sonido con la aplicación, puede experimentar interferencias de otros dispositivos (p. ej., un microondas, un router inalámbrico o TV Streamer). Si esto ocurre, aléjese del dispositivo y vuelva a intentarlo.

- 1 Tenga preparado(s) su(s) procesador(es).
- 2 Active el Bluetooth en el smartphone Android.
- 3 Ejecute la aplicación Nucleus Smart.
- 4 Pase por las pantallas de bienvenida.
- 5 Cree una cuenta de Cochlear o inicie sesión si ya tiene una.


- 6 Se muestra la pantalla **Pair your processor(s)** (Enlace sus procesadores). Pulse **Continue** (Continuar).

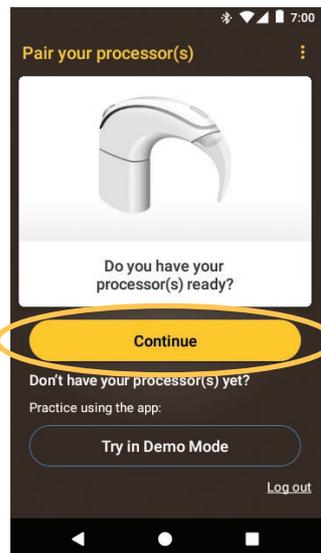

- 7 En el mensaje emergente **Location** (Ubicación), pulse **OK** (Aceptar).

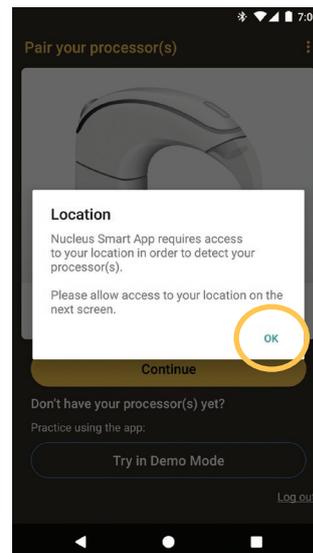

- 8 En el mensaje emergente **Allow Nucleus Smart** (Permitir Nucleus Smart), pulse **ALLOW** (PERMITIR).

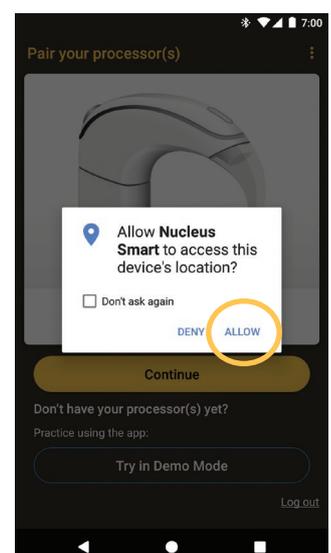

... CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE...


- 9 Se muestra la pantalla **Detect your processor(s)** (Detecte su[s] procesador[es]). **APAGUE** los procesadores de sonido y, a continuación, **ENCIÉNDALOS**. Si tiene dos procesadores, realice este paso en ambos, uno después del otro. Después de apagar y encender los procesadores, toque **Continue** (Continuar).




- 10 Cuando se muestren sus procesadores, **pulse** una vez para iniciar el enlace.




- 11 La pantalla **Paired processors** (Procesadores enlazados) muestra cuando el enlace está completo. Pulse **Continue** (Continuar).

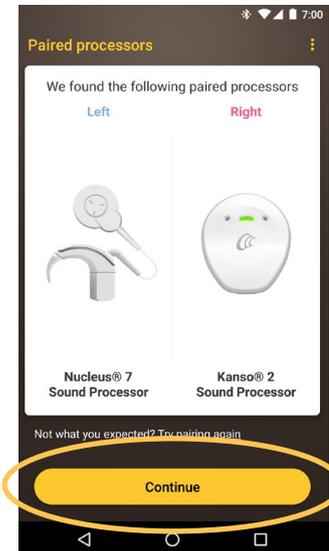


- 12 Siga los mensajes de la pantalla para **verificar** sus procesadores de sonido. La pantalla **Preparing your Processor(s)** (Preparación de su[s] procesador[es]) se muestra durante 60 segundos como máximo. Pulse **Continue** (Continuar).

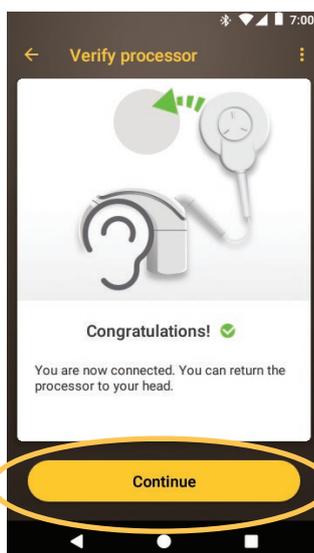

- 13 Toque una opción en la pantalla **Sound Processor(s)** (Procesador[es] de sonido). Si se le pide, introduzca los detalles del usuario.

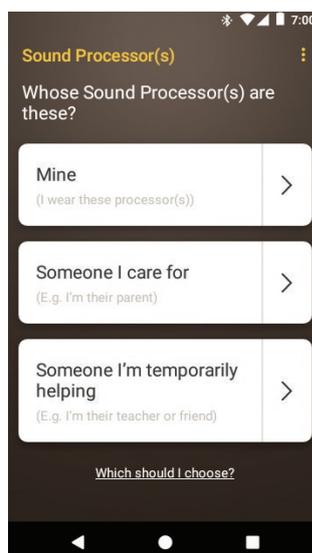

- 14 Si se muestra la pantalla **Audio streaming** (Streaming de audio), consulte los pasos en la **siguiente página**. Si se muestra la pantalla **Setup complete** (Instalación completada), pulse **Start using the app** (Comience a utilizar la aplicación).

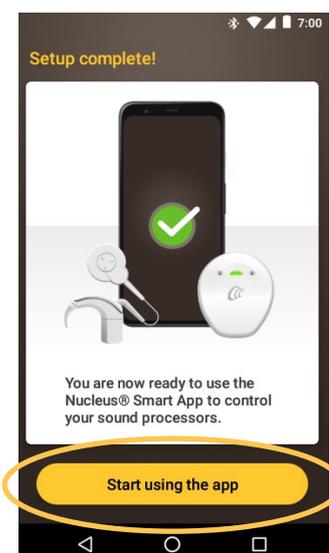

NOTA

Para enlazar dispositivos compatibles adicionales, primero debe desactivar el Bluetooth en los dispositivos que se encuentren enlazados.

# Smartphones con streaming de audio para prótesis auditivas

Si su smartphone es compatible con el streaming de audio para prótesis auditivas, puede recibir el sonido de su teléfono directamente en su procesador.


Para configurar el streaming de audio:

- 1 Cuando se muestre la pantalla **Audio streaming** (Streaming de audio), pulse **Enable** (Habilitar). Su procesador de sonido se apagará durante unos momentos.




- 2 Si ya hay otros procesadores de sonido enlazados o en streaming con su smartphone, debe **olvidarlos**. Siga las indicaciones en pantalla para **Forget** (Olvidar) el procesador. A continuación, pulse el **botón Atrás** para volver a la aplicación Nucleus Smart.

- 3 Espere mientras se muestra la pantalla **Connecting to processor** (Conectando con el procesador).

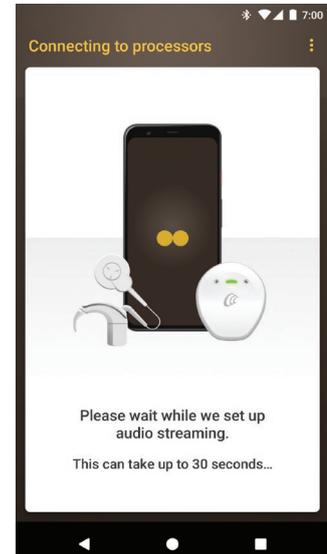


- 4 Si tiene los **sonidos del sistema** habilitados en su smartphone, se muestra la pantalla **System sounds** (Sonidos del sistema). Siga las instrucciones en pantalla para **deshabilitar los sonidos del sistema** y, a continuación, pulse el **botón Atrás** para volver a la aplicación Nucleus Smart.

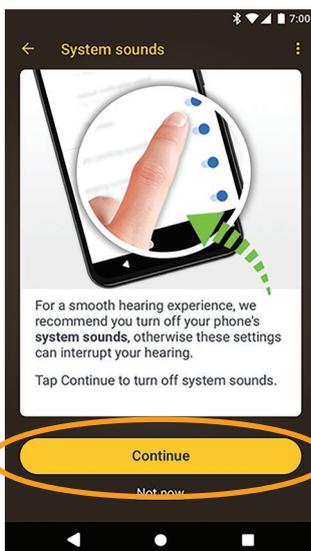

- 5 Cuando se muestre la pantalla **Setup complete!** (¡Instalación completada!), pulse **Start using the app** (Comience a utilizar la aplicación).

- 6 Ahora está listo para utilizar la **aplicación Nucleus Smart**. Consulte la *Guía de usuario de la aplicación Nucleus Smart* para obtener más información.

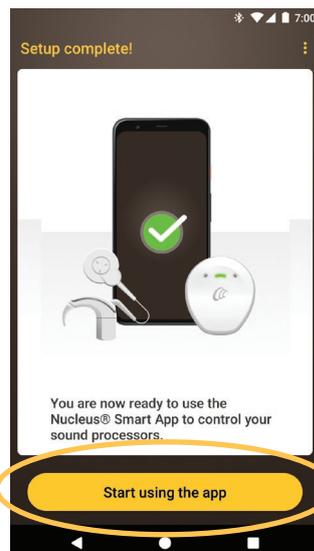

NOTA

Para enlazar dispositivos compatibles adicionales, primero debe desactivar el Bluetooth en los dispositivos que se encuentren enlazados.


# Desenlazar los procesadores

Si cambia de procesador o procesadores de sonido, por ejemplo, si recibe un nuevo procesador de sonido por parte del centro de reparación, deberá:


- **Unpair** (Desenlazar) el antiguo procesador de sonido y, a continuación,
- **Pair** (Enlazar) el nuevo procesador de sonido.

Para desenlazar los procesadores:


- 1 Abra el **Menú** de la aplicación.

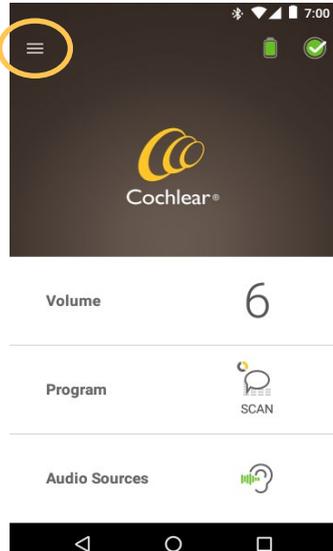


- 2 Pulse **Settings** (Ajustes).

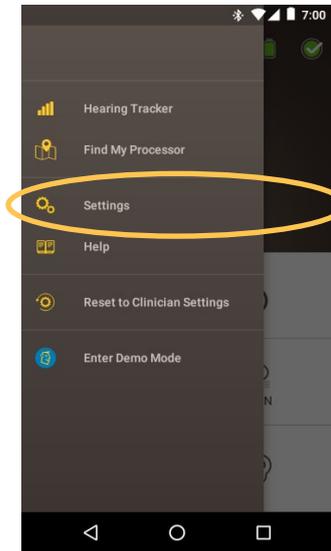


- 3 Pulse **Processor settings** (Ajustes del procesador).

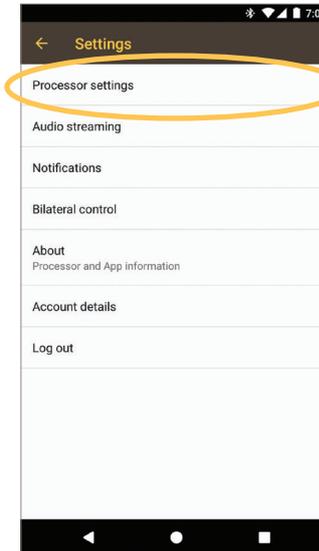


- 4 Pulse **Unpair your processor(s)** (Desenlazar su[s] procesador[es]).

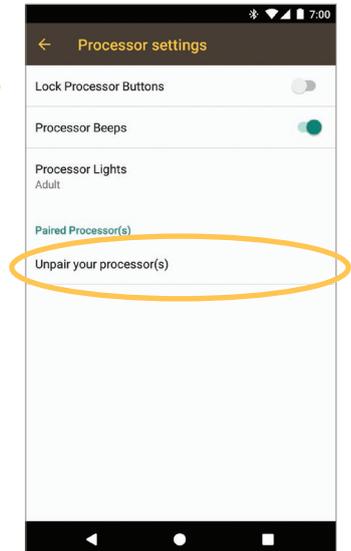


- 5 Pulse **YES** (Sí).

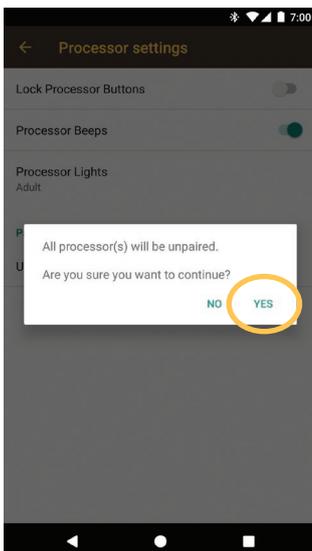

- 6 Si el streaming está habilitado para su procesador, se mostrará el mensaje para desactivar el streaming.

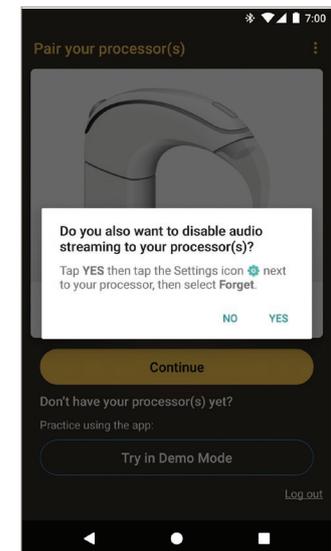


- A. Pulse **YES** (Sí) y siga los mensajes para **Forget** (Olvidar) su procesador.  
B. Pulse el **botón Atrás** para volver a la aplicación Nucleus Smart.

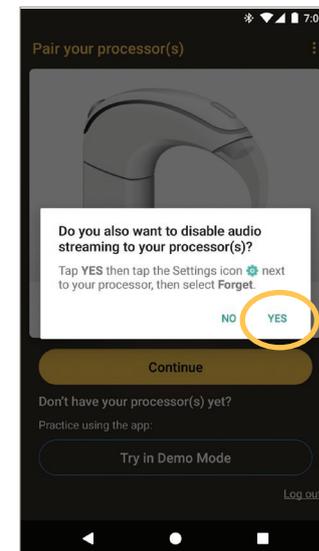


# Comprobar su estado de streaming de audio

Para comprobar su estado de streaming de audio:


- 1 Abra el **Menú** de la aplicación.

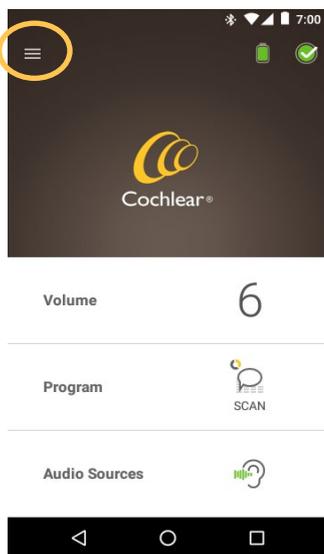

- 2 Pulse **Settings** (Ajustes).

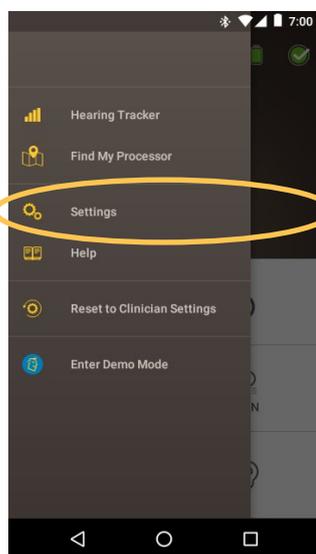

- 3 Pulse **Audio streaming** (Streaming de audio).

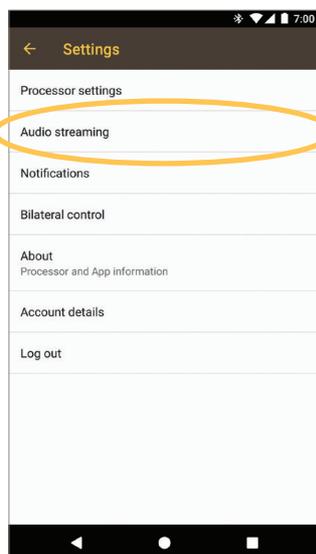


- 4 Si el streaming **no está activo**, lea la información en pantalla y pulse los enlaces disponibles para obtener más información.


# Desactivar el streaming de audio

Para desactivar el streaming de audio:


- 1 Abra el **Menú** de la aplicación.

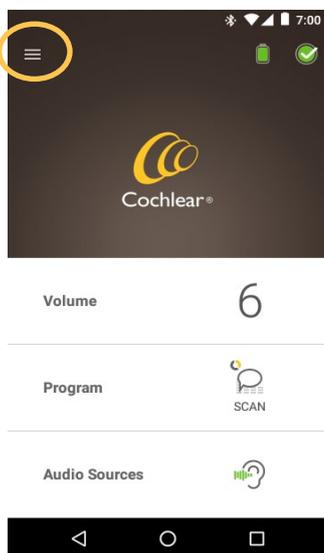


- 2 Pulse **Settings** (Ajustes).

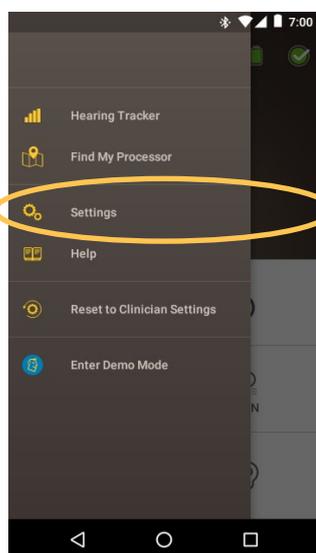

- 3 Pulse **Audio streaming** (Streaming de audio).

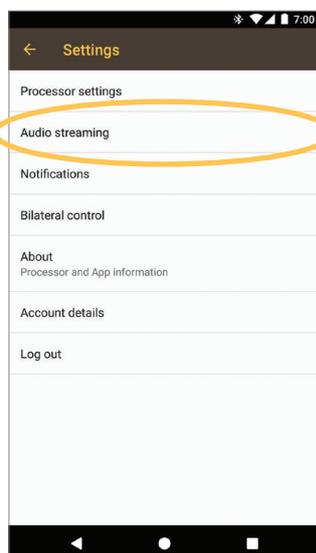

- 4 Si el streaming **está activo**, siga las instrucciones para desactivar el streaming de audio.

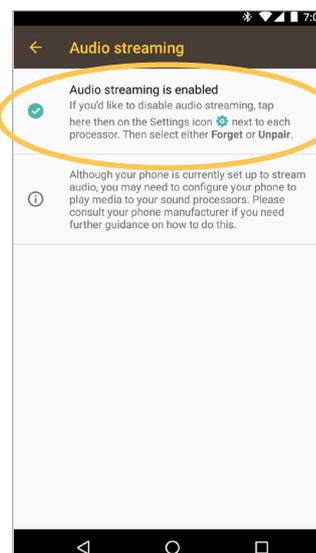

- Para obtener más información sobre la aplicación, consulte la *Guía de usuario de la aplicación Nucleus Smart*.
- Para obtener más información sobre el uso del procesador de sonido, consulte la *Guía de usuario del procesador de sonido*.
- Visite nuestro sitio web para descubrir consejos, tutoriales en vídeo y mucho más: [www.cochlear.com/](http://www.cochlear.com/).

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352  
**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555  
Fax: +61 2 9428 6352  
**EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770  
**Cochlear Europe Ltd** 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom  
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited. Android es una marca comercial de Google Inc.